

驚くほどヒト肌に近い感覚で 手軽に反復練習ができる！



サージカルテープが付く

高機能

リアルな
質感

技術の
可視化

軽量
省スペース

多用途

静注

採血

点滴

愛称：レジーナちゃん



裏側内部は透明素材のため
穿刺状態を目視できます

Starter-Kit

注射モデルに模擬血液を流すために 必要なものを取り揃えたスターキット

模擬血液を流して、バックフローを確認したい方にオススメです。



写真は、BJT-51Sです

* 商品には、専用ケースが付属します(裏面参照)。

前腕注射モデル 怒張版 ポンプキット

BJT-51S

前腕注射モデル 通常版 ポンプキット

BJT-01S

手背注射モデル ポンプキット

BJT-02S

【キット内容】

トレーニングモデル腕本体 プレート ベルト
専用ポンプ タンク 透明ボトル
接続チューブ 模擬血液 専用ケース

One Point

模擬血管には、厚み0.3mmの専用チューブを使用しています。

Option



延長チューブ TU-2

1台のポンプに複数台の腕を繋げる際、必要になります(1m×2本)。



模擬血液(粉末) BLD-02

湿気が入らないよう、小瓶に分けて模擬血液をご用意しております(2g×10本)。

交換パーツ

腕モデルは消耗品のため、
交換パーツをご用意しております。



前腕注射モデル怒張版
(4本セット) BJT-51F



前腕注射モデル通常版
(4本セット) BJT-01F



手背注射モデル
(2本セット) BJT-02W

注射トレーニングモデルの特徴

レジーナのバイオスキン医療教材シリーズは、独自のエラストマ樹脂加工技術により皮膚の質感や肌の弾力をリアルに再現した医学・看護教材用人体模型です

穿刺状態を裏面から目視できます

肉材が透明な素材で作られており、血管を目視できます。注射針の刺入角度や深度、施術者のクセ、改善ポイント等を把握できます。

◎血管内に刺入できた場合



◎血管を外してしまった場合



点滴用テープが使えます

これまでのシミュレータでは困難であったサージカルテープでの固定ができるため、練習の幅が広がります。



触診による血管位置の確認ができます

前腕・手背部分の形状、シワ、質感、弾力がヒトに近いため、触診による血管位置の確認ができます。

1台のポンプに複数台の腕を繋ぐことができます

1台のポンプに複数の腕モデル（推奨は2台まで）を繋げることができます。腕同士を離してご使用になりたい場合は、別売りの延長チューブをお求めください。




(※) 注射モデルを直列接続

静音専用ポンプを採用

授業や講習会では複数のポンプを同時に回すことがあり、ポンプの騒音が気になることがありました。しかし、レジーナの注射モデルに付属するポンプは、運転中でも静音性が高く、殆ど音は聞こえません。ポンプを注射モデルに繋げることで、バックフローの確認ができます。

針痕が残りにくく反復練習が可能

注射針の痕が残りにくいので、穿刺のたびに触診で血管を探すトレーニングを繰り返し行うことができます。

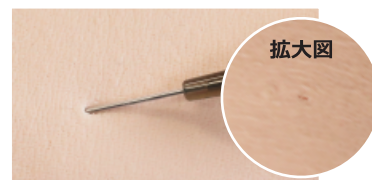

(※) 針痕は残りにくいですが、繰り返しのご使用によって穴が広がります。液が漏れ始めたら、交換のサインです。

腕に巻き付けて使用できます

付属のベルトをヒトの腕に巻き付け、注射モデルを載せることで、対面での練習が可能です。駆血は力加減が大変重要であるため、ヒトの腕での練習を推奨しております。そのため、当モデルに上腕は付属しません。



液漏れが机に広がるリスクを軽減します

腕と模擬血管（チューブ）は一体型で作られており、チューブが傷ついた際、模擬血液が漏れ出すのを抑止します。

(※) ご使用を重ねることで、液漏れは発生します。

簡単なセッティング

注射モデル本体とポンプはワンタッチで取り外すことが可能。チューブ内に液体が残っていても、漏れ出ない密閉構造なので安心です。



コンパクトな収納ケースに全て入ります

注射モデル本体、ポンプ、チューブまでコンパクトな軽量ケースに収まります。準備時間が大幅に短縮できるほか、収納スペースを取りません。



(※) サイズ：260×385×150mm

* 当社では、23G または、それよりも細い針でのご使用を推奨しています。

製造元 **株式会社 レジーナ**

販売店

本社 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-10-2
Tel.048(836)2600 Fax.048(837)0099 ✉ info-b@bioskin.jp
URL: <https://www.bioskin.jp> レジーナ バイオスキン 検索



(2020.10 改訂版)